



Alltid redo att lyfta.

Liko™ konstant skenladdning ger vårdgivaren frihet. Lyftenheten laddas hela tiden längs hela skensystemet. Du behöver inte längre dubbelkontrollera batteriets status eller återföra lyften till en specifik laddningsstation. Med skenladdning är din taklyft alltid fulladdad och redo att användas.

Den unika patentsökta skenladdningslösningen kan installeras i alla standardskensystem från Liko™, nya så väl som redan installerade.

Det är även en estetiskt tilltalande lösning utan synliga sladdar eller behov för närhet till vägguttag, vilket ger fullständig frihet att installera skensystemet varsomhelst i ett rum.



Fördelar, Liko skenladdning

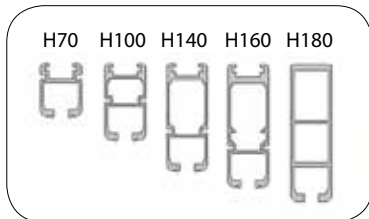
- Alltid redo att lyfta
- Tidsbesparande, alltid tillgängligt
- Batteriet är alltid fulladdat
- Längre livstid för batteriet
- Estetiskt tilltalande – inga synliga sladdar
- Kan installeras i nya och redan installerade skenor
- Laddning i skenor varsomhelst i ett rum
- Möjlighet att installera skensystemet varsomhelst i ett rum

**Full effekt.**

Lyften är alltid ansluten till strömförsörjningen genom laddningsspåret inne i skenan. I händelse av ett strömavbrott kan lyften fortfarande användas med batteridrift.

Säker för alla miljöer.

Klassad för IP-klass X4 och med korrosionsskyddad kan skenladdningen installeras i alla miljöer, inklusive badrum.

**Passar alla skenor från Liko.**

Glöm specialanpassade och dyra skenor. Likos skenladdningsspår kan monteras på alla standardskenor, rakbanor och traverssystem, såväl nya som redan installerade.

Kompatibilitet.

För att kunna dra fördel av Liko™ konstant skenladdning måste ditt system vara försett med IRC-vagn och ha en kompatibel lyftenhet.



IP-klass:	X4
Elektricitet	Ansluten till strömuttag
Elektricitet, isolerat IRC-spår:	24 V
Material, IRC-spår:	Korrosionsskyddat Cu/Ni
Produktnummer och installation	
För information om skeninstallation och lyftenhetskompatibilitet kontakta din närmaste Liko-representant.	



Skenladdning har testats av ackrediterat testinstitut och uppfyller alla krav enligt MDD klass I produkter (MDD 93/42/EEC). Skenladdning uppfyller kraven för IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 och CAN/CSA C22.2 No.601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485. Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc.
Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
 Deutschland _____ +49 (0)211 16450-0
 Nederland _____ +31 (0)347 32 35 32
 Italia _____ + 39 (0)2 950541
 Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
 (deutschsprachig) _____ +41 (0)21 706 21 38

Österreich _____ +43 (0)2243 28550
 Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
 Iberia _____ +34 (0)93 6856000
 Nordic Countries _____ +46 (0)920 47 47 11
 Export _____ Kontakta
 den lokala Hill-Rom-distributören via
 webbplatsen eller ring _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.
 © 2010 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES