

ClinActiv™ ⊕ MCM™

Nästa generations trycksårsvård med Immersion™ Therapy och Microclimate Management™ för förbättrat skydd mot hudskador



Funktioner och fördelar

- Fem enskilda lågtrycksområden, inklusive ett särskilt hälområde
- Tryckjustering i realtid som styrs av den interna Immersion-sensorn justerar det interna trycket i dynan direkt utifrån patientens storlek, kroppsform, vikt och position
- Flexibilitet att välja mellan terapeutiskt läge med kontinuerligt eller alternerande lågt tryck
- Kontinuerlig Microclimate Management begränsar effekterna av temperatur och fuktbildning
- Särskild hälzon med ultralågt tryck för optimalt skydd av det känsliga hälområdet, och med förbättrat stöd för underbenen
- P-MAX-funktion med en knapptryckning ger snabb uppblåsning för att underlätta ompositionering och förflyttning av patienten
- Patienturstigningslarm informerar vårdpersonalen om patienten har tagit sig ur sängen

ClinActiv ⊕ MCM

Terapeutiskt system för tryckomfördelning



Madrassersättningsystemet ClinActiv ⊕ MCM från Hill-Rom hjälper till att förebygga och behandla trycksår hos vuxna låg- till högriskpatienter genom att tillhandahålla antingen alternerande eller kontinuerlig lågtrycksomfördelning.

Det patenterade MCM-systemet hjälper även till att hantera patientmikroklimatet och minskar risken för vävnadsskador som ett resultat av överdriven värme och/eller fukt.

Välj mellan behandling med CLP (Continuous Low Pressure, kontinuerligt lågt tryck) eller ALP (Alternating Low Pressure, alternerande lågt tryck). Hill-Rom ClinActiv ⊕ MCM ger äkta I-mmersion-behandling i båda lägena för att uppnå och bibehålla minsta möjliga tryck mellan kontaktytor.

I båda lägena är den exakta nivån av tryckomfördelning kontinuerligt och automatiskt styrd av den interna I-mmersion-sensorn som justerar det interna celltrycket utifrån varje patients storlek, vikt, morfologi och position.

Trycksårsvård dygnet runt kan fås genom att även använda Reflex-sittkudden som ansluts till samma lufttillförselenhet men som kan tillslutas för större frihet för patienten utanför sängen.

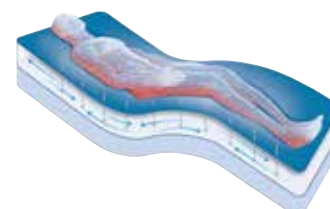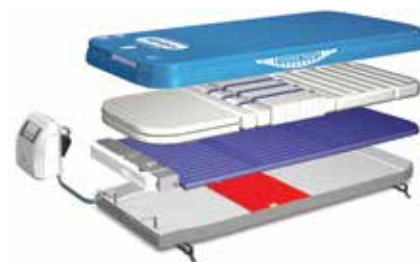

Tekniska specifikationer

Madrassersättning

Längd	203 cm
Bredd	92 cm
Höjd	18 cm
Vikt	13,9 kg

Kontrollenhet

Längd	31 cm
Bredd	22 cm
Höjd	28 cm
Vikt	4,6 kg

Säker arbetsbelastning

250 kg

Rekommenderad terapeutisk vikt

30 till 150 kg

Överdragets material

Polyuretanöverdrag på polyestermaterial, 360° blyxtlås, svetsade sömmar, låg friktion, töjbart i två riktningar, fuktgenomträngligt, bakteriostatiskt, fungistatiskt och antimikrobiellt. Kan torkas av och tvättas.

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 10 000 anställda över hela världen. Vi samarbetar med vårdgivare i över 100 länder, inom alla vårdmiljöer, genom att fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och ekonomiska resultaten inom fem kärnområden: **förbättrad rörlighet, sårsvård och förebyggande åtgärder, patientövervakning och -diagnostik, kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård.** Hill-Roms medarbetare, produkter och program arbetar mot ett mål: **varje dag över hela världen förbättrar vi vårdresultaten för patienter och deras vårdgivare.**

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. Om du vill ha mer information om våra produkter och tjänster kan du kontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill-rom.se

ClinActiv+ MCM-yan är utformad för att förhindra och behandla trycksår i kategori I, II, III och IV hos patienter med låg till mycket hög risk för att utveckla trycksår, och som väger minst 30 kg och är minst 146 cm långa, i många olika vårdmiljöer.

Klass IIa

Anmält organ: LNE/G-Med CE0459

Tillverkare: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner Frankrike

Den här medicintekniska produkten är en reglerad sjukvårdsprodukt som, i enlighet med denna förordning, är försedd med CE-märkning. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter. Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Dok. nr: SSV119301-02, 28 juli 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom