


P280


Tillhandahåller en Safe Skin™-miljö för dina patienter



Skum

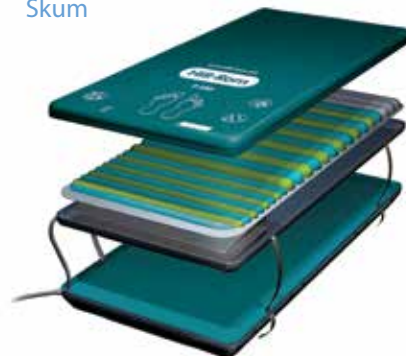

Luft

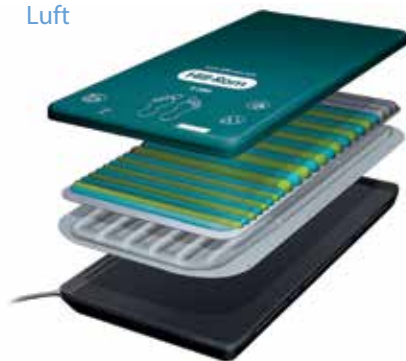

Funktioner och fördelar

Särskilt utformad för att **på ett bättre sätt förebygga och behandla** patienter som riskerar att drabbas av eller lider av trycksår

Välj mellan **alternerande eller kontinuerlig behandling med lågt tryck** för att passa patientbehov och kliniska preferenser

Justerbara cykeltider och inställning av fasthet för större kontroll över patientbehandling och komfort

Säkerhetsfunktioner för patient och vårdgivare inklusive automatisk låsning av kontrollpanelen, felindikatorer och 10 timmars transportläge

Tre zoner för tryckomfördelning ger ytterligare skydd för känsliga kroppsdelar, inklusive alternerande hälzon med 5° lutning

P-MAX- och PLUS-upplåsningsalternativ för ytterligare stöd och säkerhet vid patientplacering och förflyttningar

Madrassersättning är tillgängligt med patientstödlager av antingen luft eller skum

P280

Överdrag och terapeutiskt madrassersättningsystem

Bäddmadrassen eller madrassersättningsystemet P280 från Hill-Rom hjälper till att förebygga och behandla trycksår hos vuxna låg- till högriskpatienter genom en justerbar nivå av tryckomfördelning i behandlingslägen med både alternerande och kontinuerligt lågt tryck.

Denna behandlingsmetod minskar kompression av känsliga vävnader och överensstämmer med NPUAP/EPUAP/PPPIA International Guidelines som råder läkare att "använda en aktiv stödmadrass för patienter som löper hög risk att utveckla trycksår när frekvent manuell ompositionering inte är möjligt."¹

Tekniska specifikationer

Bäddmadrass

Längd	200 cm
Bredd	90 cm
Höjd	10 cm
Vikt	6,1 kg

Madrassersättning – skum

Längd	200 cm
Bredd	90 cm
Höjd	17 cm
Vikt	12 kg

Madrassersättning – luft

Längd	200 cm
Bredd	90 cm
Höjd	17 cm
Vikt	7,5 kg

¹ EPUAP/NPUAP/PPPIA International Guidelines for the Prevention & Treatment of Pressure Ulcers, 2014

Kontrollenhet

Längd	29 cm
Bredd	20 cm
Höjd	12 cm
Vikt	2,2 kg

Säker arbetsbelastning 250 kg

Rekommenderad terapeutisk vikt 30 till 140 kg

Överdragets material

Polyuretanöverdrag på polyestermaterial, 360° blyxtlås, svetsade sömmar, låg friktion, töjbart i två riktningar, fuktgenomträngligt, bakteriestatiskt, fungistatiskt och antimikrobiellt. Kan torkas av och tvättas. Klorinbaserade rengöringslösningar kan användas ($\leq 1\ 000$ ppm).

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 10 000 anställda över hela världen. Vi samarbetar med vårdgivare i över 100 länder, inom alla vårdmiljöer, genom att fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och ekonomiska resultaten inom fem kärnområden: **förbättrad rörlighet, sårvård och förebyggande åtgärder, patientövervakning och -diagnostik, kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård.** Hill-Roms medarbetare, produkter och program arbetar mot ett mål: **varje dag över hela världen förbättrar vi vårdresultaten för patienter och deras vårdgivare.**

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. Om du vill ha mer information om våra produkter och tjänster kan du kontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill-rom.com

P280-ytan är utformad för att förhindra och behandla trycksår i kategori I, II och III hos låg- till högriskpatienter, som väger minst 30 kg och är minst 1,46 m långa, i många olika vårdmiljöer. Klass IIa

Anmält organ: LNE/G-Med CE0459

Tillverkare: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner Frankrike

Den här medicintekniska produkten är en reglerad sjukvårdsprodukt som, i enlighet med denna förordning, är försedd med CE-märkning. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter. Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Dok. nr: 5SV119302-04, 27 juli 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom